

# Exempel på användande av EMG-utrustningen på HSC

En praktisk guide

Peter Kvillegård

Version 1.0  
2020-01-23

## Om denna guide

Jag och Jonatan Malmström använde under hösten 2019 EMG-utrustningen på HSC i Lund för ett experiment. Vi lärde oss att använda program och apparater av andra elever och av vår handledare. I denna användarguide har vi skrivit ner hur vi använde utrustningen, i förhoppning om att det kan vara användbart för andra.

Utrustningen som användes och beskrivs här är MegaWin 3.01-b10 mjukvara med Mega ME6000-T16 biomonitor.

Vårt arbete fokuserade på att få fram medelamplitud under en definierad tid i olika muskler samtidigt, och användarguiden är därför inriktad för det ändamålet. Detta är inte en allomfattande manual, utan ett exempel på hur utrustningen kan användas. Det är mycket möjligt att det finns bättre och smidigare sätt, och det finns många andra ändamål som inte kommer att beskrivas här.


All text och bilder är tillgängliga under Creative Commons Zero (CC0), vilket lite förenklat innebär att vem som helst har rätt att göra vad som helst med innehållet. Du får använda, modifiera, och distribuera materialet utan begränsningar och utan krav på att attribuera mig. Källkoden är skriven i  $\text{\LaTeX}$  och finns att hitta tillsammans med bilderna på [http://www.github.com/mouboo/lund\\_emg\\_userguide](http://www.github.com/mouboo/lund_emg_userguide). Om du upptäcker fel eller vill bygga vidare på denna guide är du mycket välkommen att göra så, kontakta mig på [peterkvillegård@gmail.com](mailto:peterkvillegård@gmail.com) för mer information om detta.

I	Logga in .....	1
II	Skapa protokoll .....	2
III	Skapa person .....	13
IV	Anslut biomonitor .....	16
V	Kontrollera signalen .....	17
VI	Utför mätning .....	6
VII	Bearbeta signalen .....	7

## I. Logga in Steg 1/1

### Instruktioner


- 1 Kryssa i "Workstation only"
- 2 Fyll i Username: emg, Password: emgemg
- 3 Klicka på "OK"

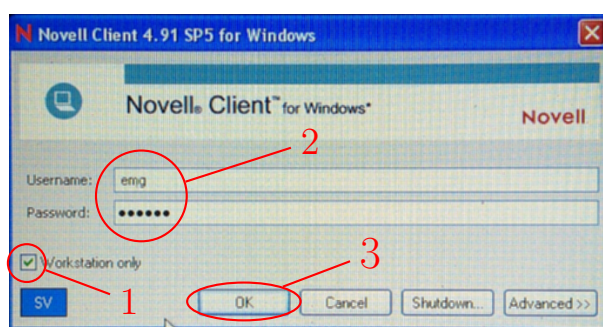

## II. Skapa protokoll Steg 1/11

### Instruktioner

- 1 Klicka på "Protocol"

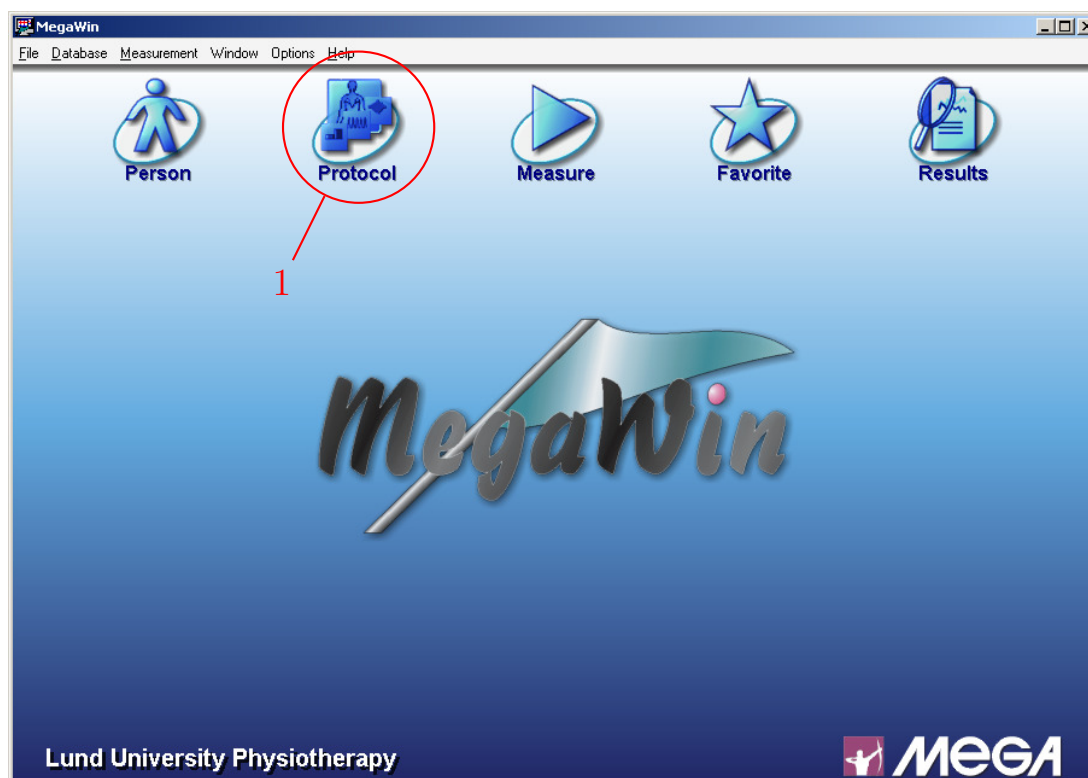


### Kommentar

Du behöver bara skapa protokoll en gång, detta kan sedan användas för alla kommande mätningar.

## II. Skapa protokoll Steg 2/11

### Instruktioner

- 1 Klicka på "New..."

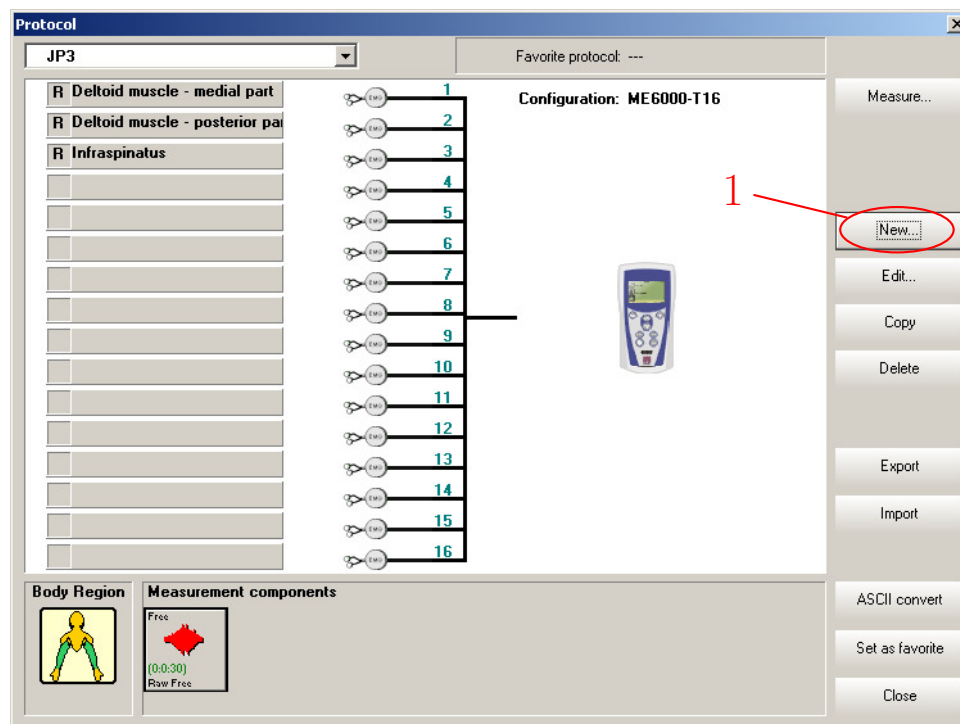

## II. Skapa protokoll Steg 3/11

### Instruktioner

- ① Fyll i protokollets namn
- ② Välj “Advanced protocol”
- ③ Klicka på “Next”


The screenshot shows the 'Protocol Editor' window. At the top, a blue header bar contains the text 'Give name to protocol and select Quick or advanced type.' Below this, there are two text input fields: 'Protocol name' (containing 'ledare') and 'Editor name'. A red circle with the number '1' points to the 'Protocol name' field. Below the input fields are two radio button options: 'Quick protocol' (unselected) and 'Advanced protocol' (selected). A red circle with the number '2' points to the 'Advanced protocol' option. Below the radio buttons is a 'Description' section with a text area and a scroll bar. At the bottom of the window is a row of five buttons: 'Cancel', 'Back', 'Next', 'Finish', and 'Finish & measure'. A red circle with the number '3' points to the 'Next' button.

### Kommentar

I denna guide har jag valt att kalla protokollet “ledare”, döp gärna ert protokoll till något unikt som ni kommer ihåg, exempelvis försöksledarnas initialer.

### Instruktioner


- ① Välj "ME6000-T16"
- ② Klicka på "Next"

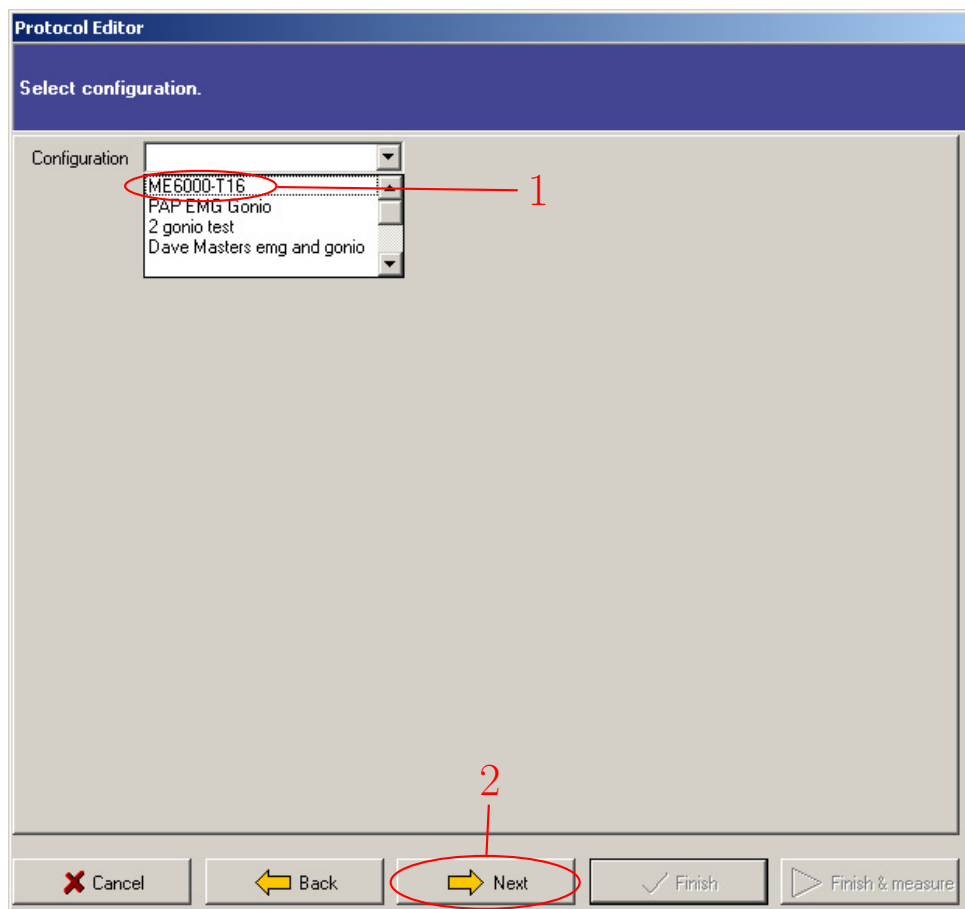



### Instruktioner

- 1 Vlj "General body", eller annat alternativ
- 2 Klicka p "Next"

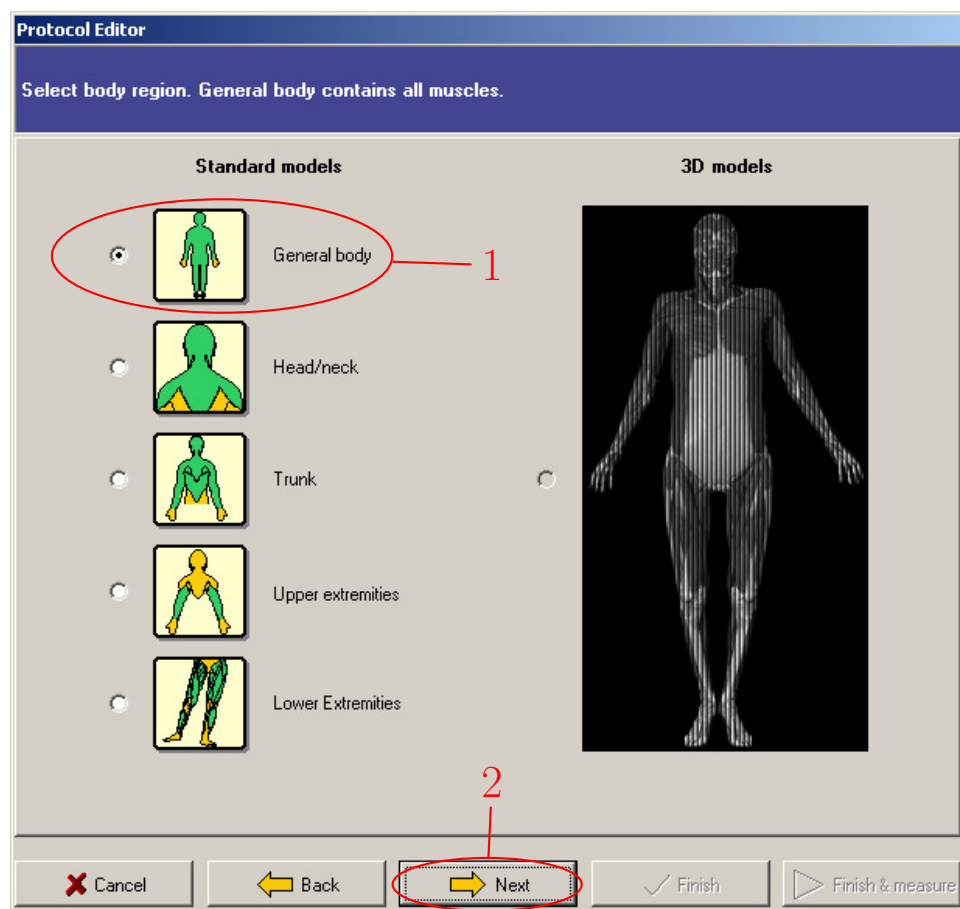


### Kommentar

Du kan även vjlja att begrnsa vilka muskler som ska visas genom att vjlja ett annat alternativ. Vi hittade inget stt att skapa ett protokoll som anvnder muskler frn olika kategorier hr, drfr rekommenderar vi att vjlja "General body", eller den kategorin som passar bst fr ert experiment, och vid behov lgg till muskler som saknas i kommande steg.

### Instruktioner

- ① Markera första kanalen
- ② Klicka på "Select source..."

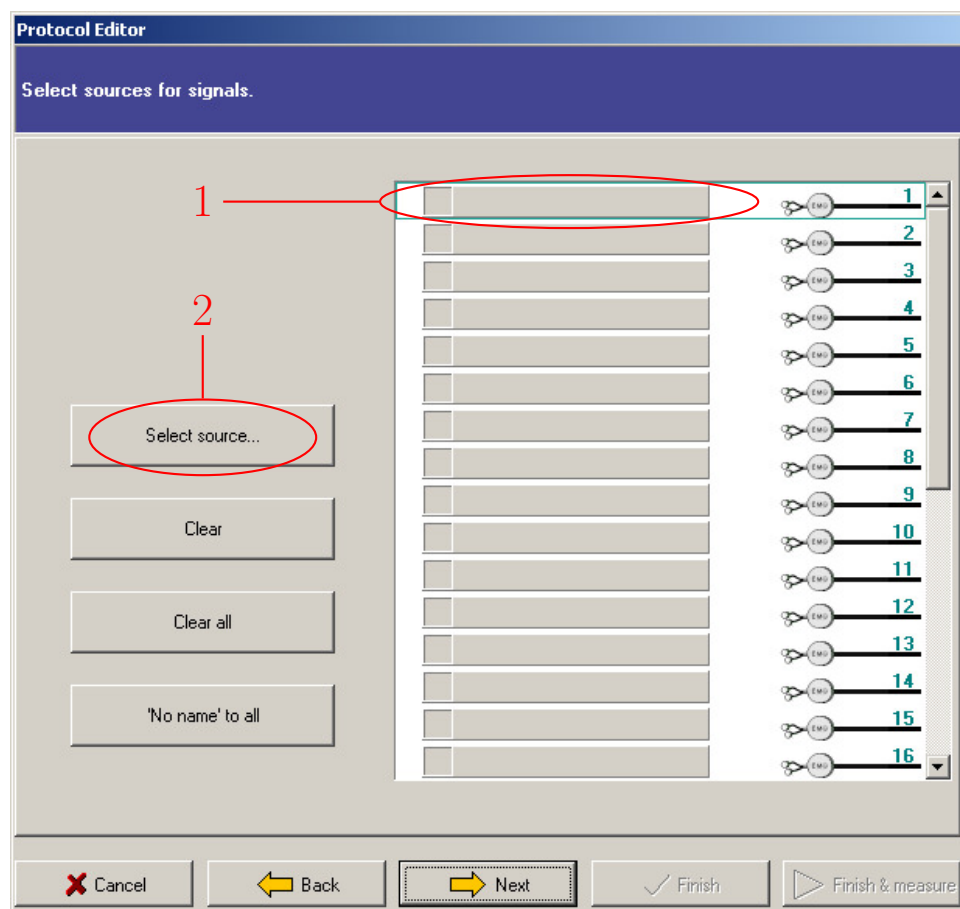


### Kommentar

Kanalerna motsvarar samma ordning som sladdarna är märkta. ME6000-T16 har 4 ingångar som vardera kan ha 4 kanaler.

### Instruktioner

- 1 Välj om muskeln är på höger eller vänster sida
- 2 Markera rätt muskel
- 3 Klicka på "OK"

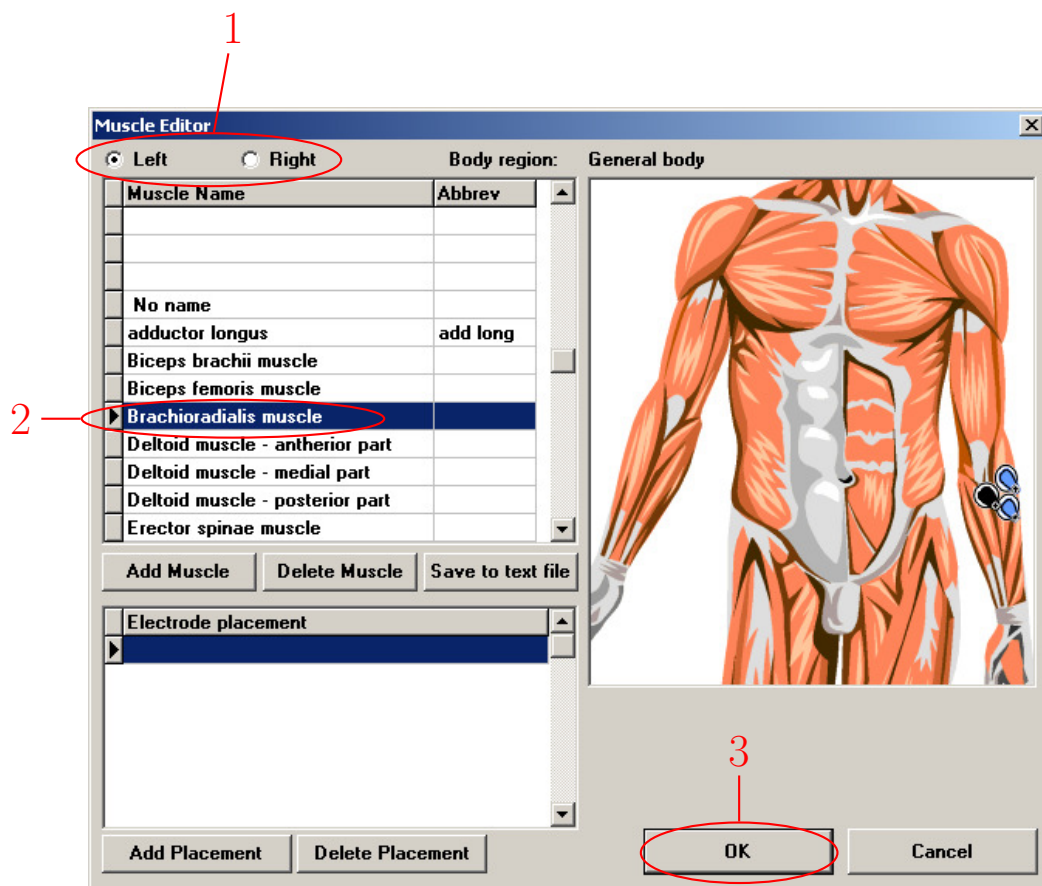


### Kommentar

Muskeln du väljer bestämmer vilket namn som kommer att stå för denna kanal under mätningar och resultat. Om du inte hittar rätt muskel kan du välja "Add Muscle" och skriva in ett eget namn. Detta är alltså enbart för att du ska ha koll på vilken kanal som mäter vad i framtida steg.


### Instruktioner

- ① Om du vill lägga till fler muskler, upprepa steg 6 och 7 med nästa fria kanal
- ② När du har lagt till alla muskler, klicka på "Next"

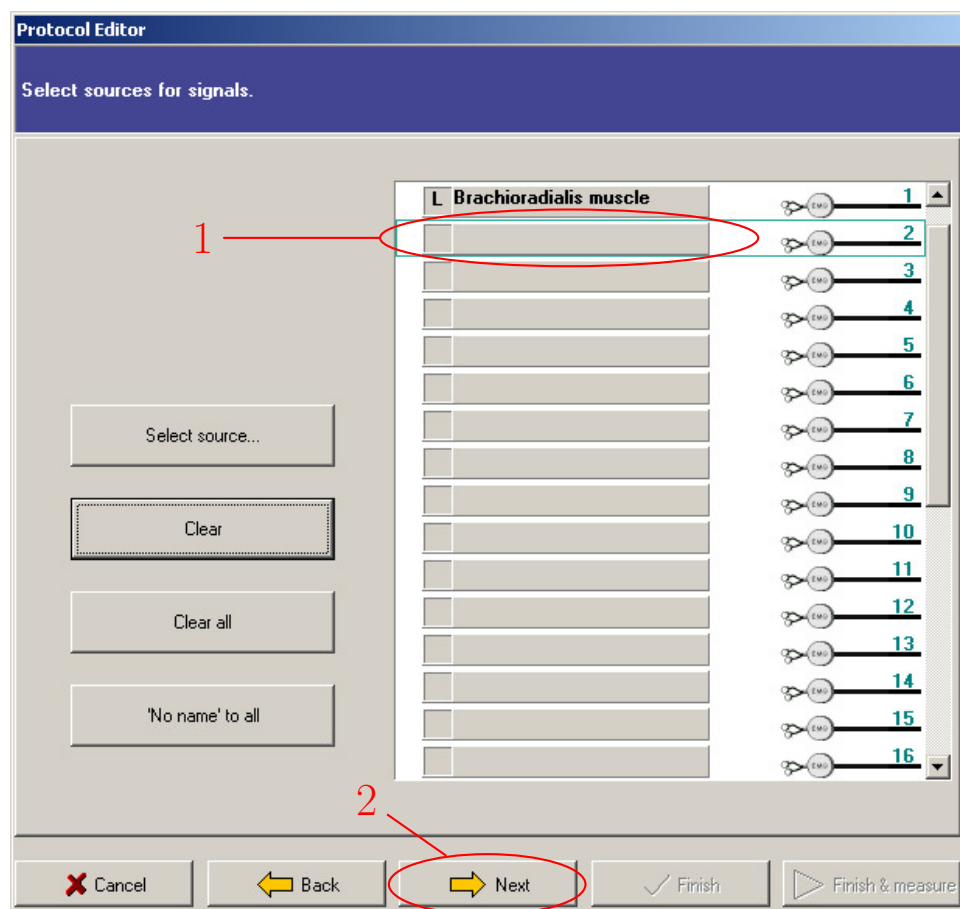

### Instruktioner


- 1 Klicka på "Raw Free"
- 2 Klicka på "Pick to protocol"

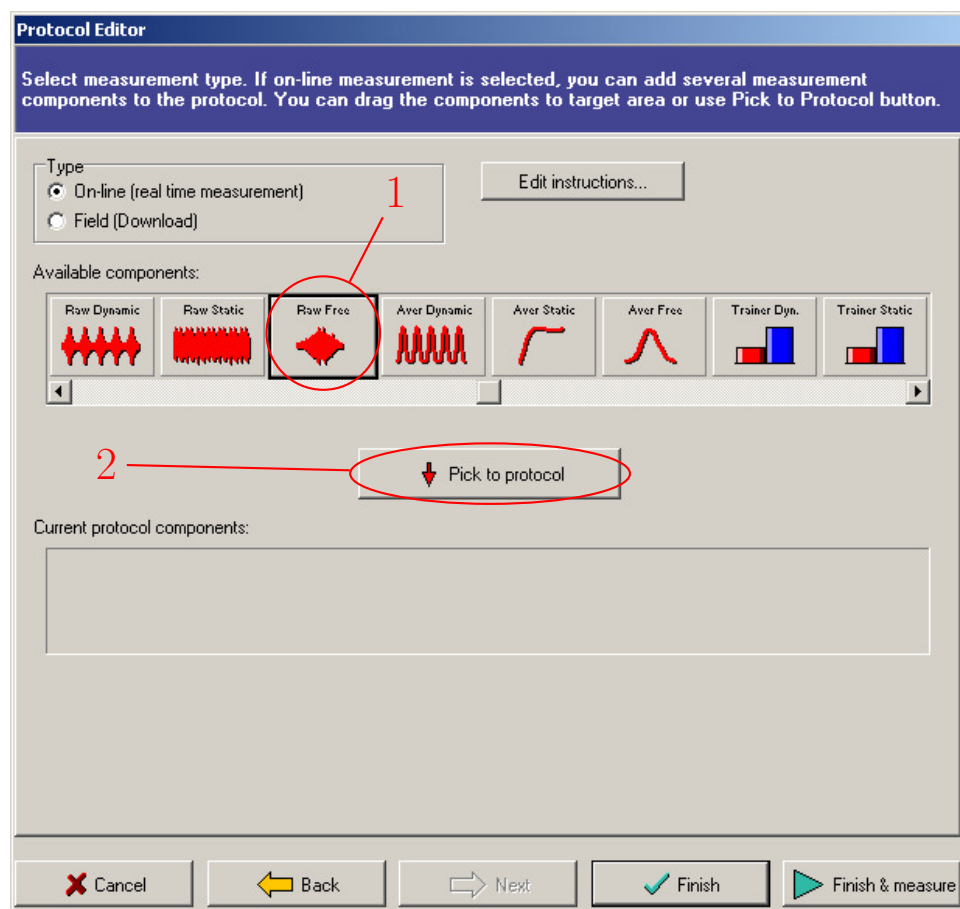

## II. Skapa protokoll Steg 10/11

### Instruktioner

- 1 Avmarkera "Stop when time is up"
- 2 Klicka på "OK"

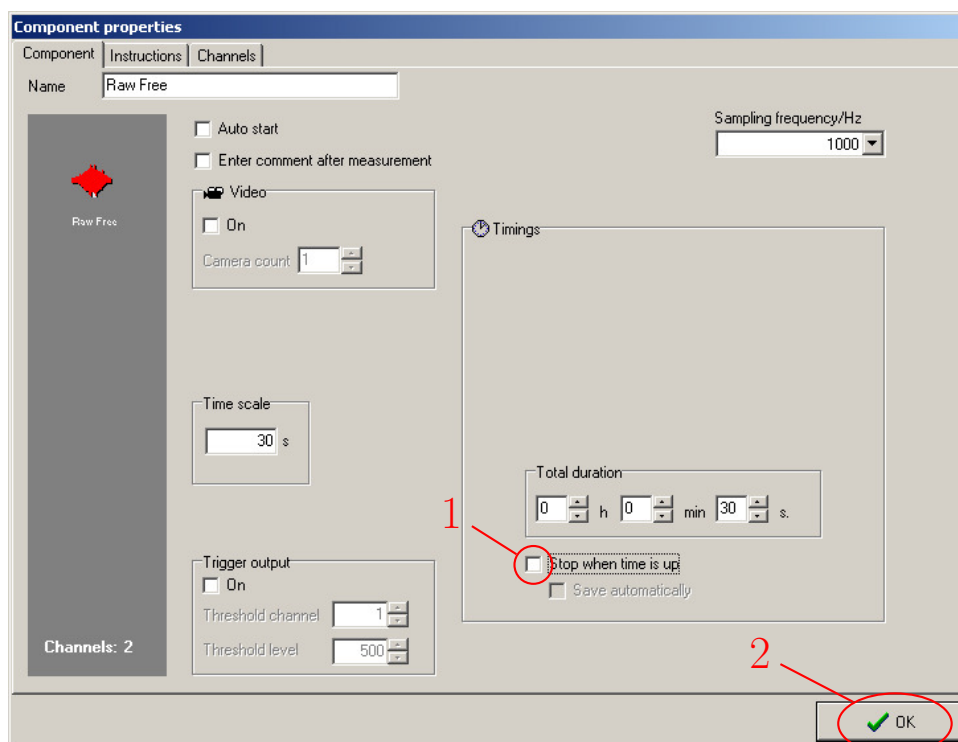


### Kommentar

Här finns möjlighet att ändra samplingsfrekvensen. En tumregel är att ha högre frekvens än dubbla övre gränsen för bandpassfrekvenserna. 1000 Hz är ett rimligt värde för ett bandpassfilter på 15–400 Hz.

“Time scale” avgör hur mycket tid som kommer visas i fönstret vid en mätning samtidigt. Med “Stop when time is up” avmarkerad så kommer mätningen att fortsätta även efter denna tid, tills den avbryts av operatören.

### Instruktioner

- 1 Klicka på "Finish"

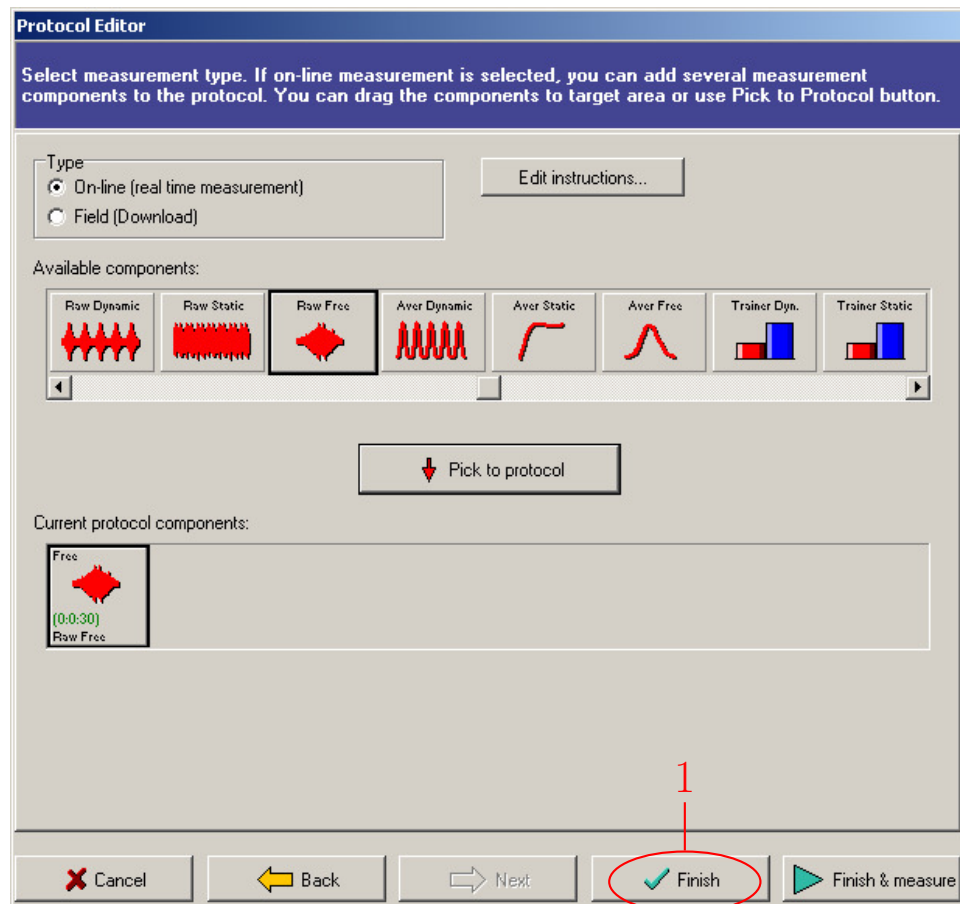

### Kommentar

Du har nu skapat ett protokoll.

## II. Skapa person Steg 1/3

### Instruktioner

- 1 Klicka på "Person"



### Kommentar

Du behöver skapa en person för varje testperson. Det är ett snabbt steg som kan göras vid testtillfället.



### III. Skapa person Steg 2/3

## Instruktioner

- 1 Klicka på "New person"

Person

Selected person: JP TP 17

Select by: ☒ Name ☐ Birthday

ASCII file...

Main Info | Appointment

Last name: JP TP 17

First name:

Birthday: 1991-10-15

Height:

Weight:

Sex: ☐ Female ☒ Male

Occupation / Education:

Street Address:

City:

Zip Code:

State / Country:

Phone (home):

Phone (work):

Phone (mobile):

Fax:

E-Mail:

Diagnosis At Entry:

Classification:

Married: ☐

Medication:

Edit

Print

Person info...

Person list...

**New person**

Remove person

Results...

Save

Cancel

Close

### III. Skapa person Steg 3/3

#### Instruktioner

- ① Fyll i “Last name”. Resten behöver inte fyllas i
- ② Klicka på “Save”

Person

Selected person

Select by ☒ Name ☐ Birthday

ASCII file...

Main Info Appointment

1 — Last name ledare\_tp\_1

First name

Birthday 1991-10-15

Height

Weight

Sex ☒ Female ☐ Male

Occupation / Education

Street Address

City

Zip Code

State / Country

Phone (home)

Phone (work)

Phone (mobile)

Fax

E-Mail

Diagnosis At Entry

Classification

Married ☐

Medication

Edit

Print

Person info...

Person list...

New person

Remove person

Results...

2 — Save

Cancel

Close


#### Kommentar

Med tanke på testpersonernas anonymitet så är det bra att döpa testpersonerna enligt ett system där personerna är indexerade. Exempelvis kan “tp\_1” betyda “testperson 1”. Om alla namn börjar med något som står för testledarna eller experimentet, så kommer alla personer att hamna efter varandra i programmet. I denna guide har jag därför kallat personen “ledare\_tp\_1”. Byt ut “ledare” mot något som är unikt för er.

## IV. Anslut biomonitor Steg 1/1

### Instruktioner

- ① Anslut sladden till "CH1-4"

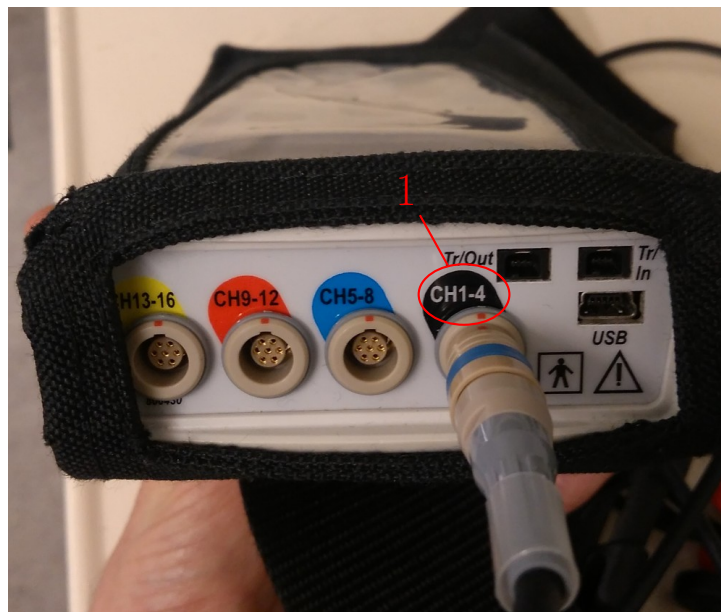

### Kommentar

ME6000-T16 har fyra ingångar, som med sladdar förgrenar sig till fyra kanaler för varje ingång. Protokollet definierar namn för kanalerna. Om ni exempelvis sätter sladden i "CH1-4", så måste protokollet ha namn för kanalerna i omfånget 1-4. Sladdarna på HSC är märkta så att varje förgrening har en siffra. Man kan sätta sladdarna i "fel" ingång, bara man behåller inbördes ordning. Det vill säga, sätter man sladden med förgreningar märkta 5-8 i ingången märkt 1-4, så kommer förgrening 5 motsvara kanal 1, förgrening 6 motsvara kanal 2, osv.

Slå på biomonitorn genom att hålla inne knappen märkt med en punkt på framsidan nere till vänster.

Datorns operativsystem kan visa ett meddelande att enheten är ansluten. Stäng ner alla program utom MegaWin, inklusive eventuella antivirusprogram,

## Instruktioner


- 1 Klicka på "Measure"



## IV. Kontrollera signalen Steg 2/?

### Instruktioner


- ① Kontrollera att "Protocol" och "Person" stämmer
- ② Klicka på "Run protocol"

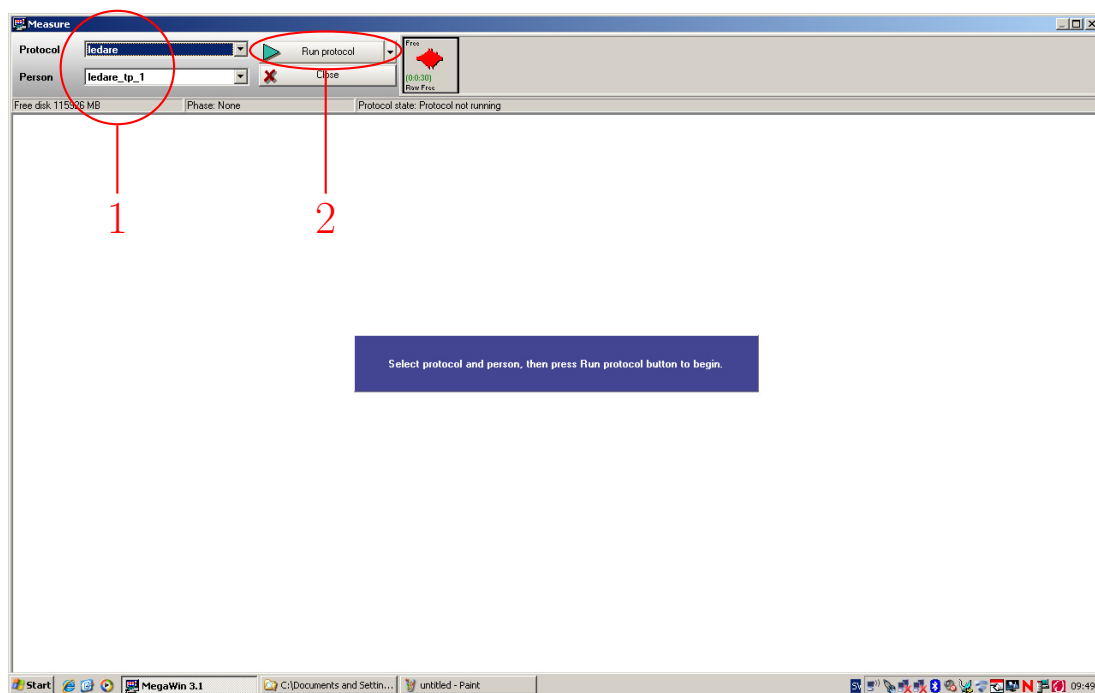

## IV. Kontrollera signalen Steg 3/?

### Instruktioner


- 1 Klicka på den röda cirkeln för att starta mätning

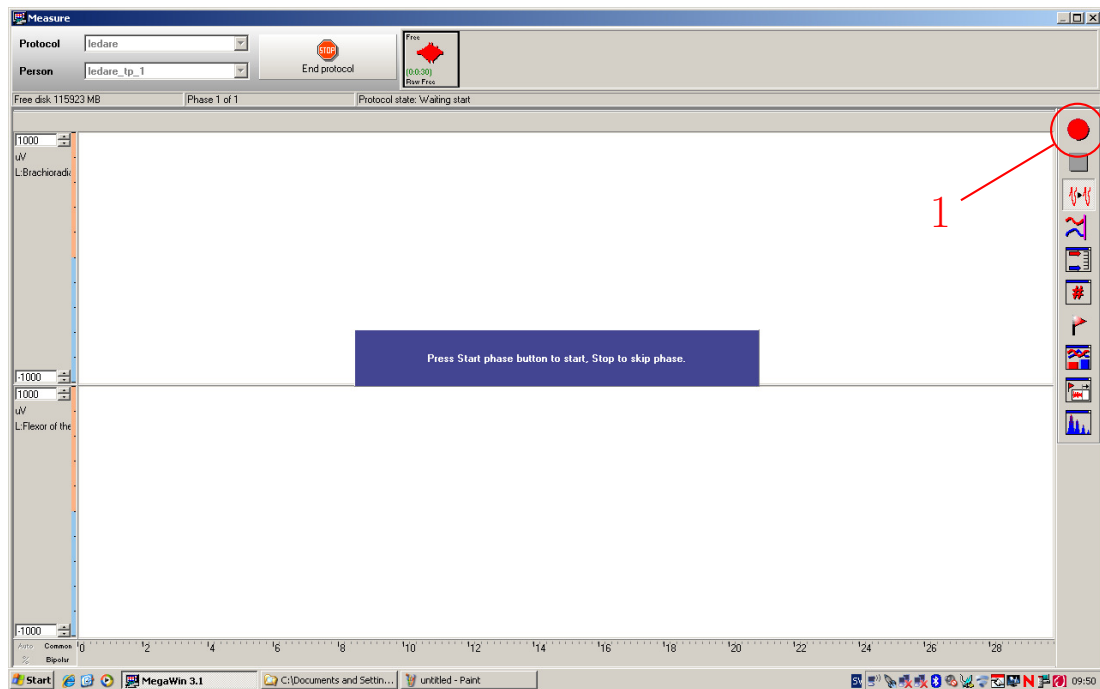

## IV. Kontrollera signalen Steg 4/?

### Instruktioner

- 1 Klicka på den röda cirkeln för att starta mätning

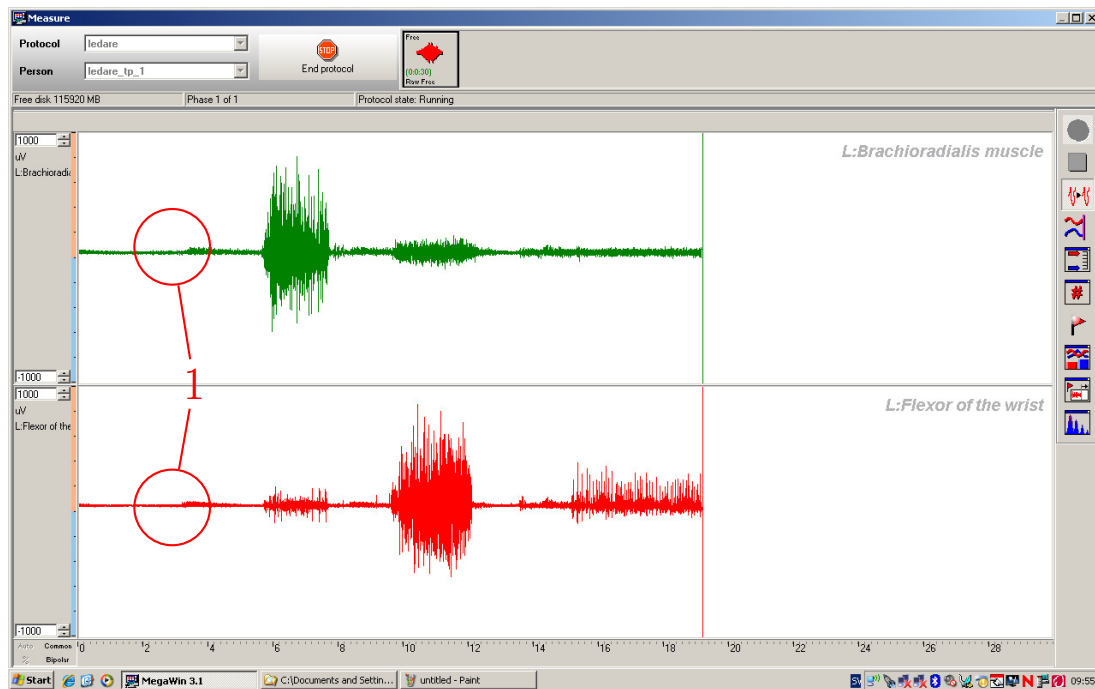

Kommentar